



Ihr Team engagiert sich jeden Tag

HALYARD* OP-Mäntel unterstützen Sie in jeder Hinsicht.

Unsere
Zusage
an Sie

Überlegene
Infektions-
prävention



Ein OP-Mantel für jede Gelegenheit

Im OP (Operationssaal) kommen Sie routinemäßig mit Blut und Körperflüssigkeiten in Berührung. Das richtige Schutzniveau kann dabei eine entscheidende Rolle spielen. Halyard bietet ein umfassendes Sortiment an OP-Mänteln unterschiedlicher Schutzniveaus für verschiedene Arten chirurgischer Eingriffe. Ganz gleich, welcher Art Ihre chirurgische Aufgabe ist, mit Schutzmänteln von Halyard sind Sie immer bestens ausgerüstet.

Maximaler Schutz – im Handumdrehen

Wir wissen, dass unterschiedliche chirurgische Aufgaben unterschiedliche Schutzniveaus erfordern, daher verwendet Halyard ein „Ampelsystem“ - so können Sie einfach und schnell für Ihren unmittelbaren Bedarf den richtigen OP-Mantel finden.

Unsere Schutzmäntel bieten drei verschiedene Schutzniveaus, jeweils durch ein farbiges Kragenband gekennzeichnet:

Gelb

Standard
Performance

Grün

Standard Performance
mit Materialverstärkung

Rot

Leistungsstarke,
folienverstärkte
Schutzmäntel






Im Handumdrehen den richtigen OP-Mantel finden

Schutzniveau

- High Performance
- Standard Performance mit Materialverstärkung
- Standard Performance


Materialmerkmale

-  Atmungsaktiv
-  Schutz vor Flüssigkeiten
-  Komfort

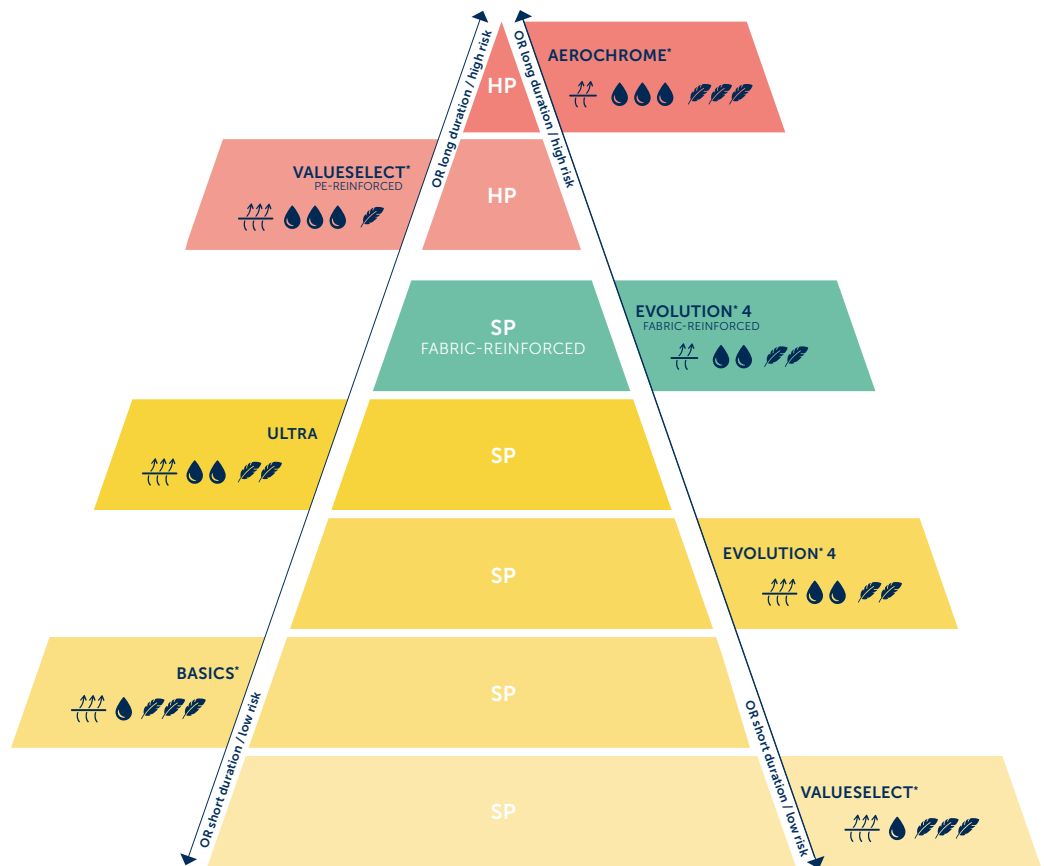

● ● ● "Standard and High Performance" gemäß Definition der Europäischen Norm EN13795-1:2019

KERNKOMPETENZEN VON HALYARD*

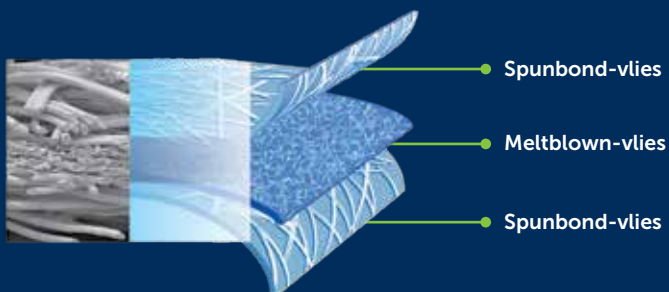


SMS

Zwei Spinnvlies-Außenschichten (Spunbond) aus Polypropylen sorgen für überragende Festigkeit und Strapazierfähigkeit, die Meltblown-Mittelschicht dient dem Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten, und unsere SMS-Technologie bedeutet geringe Partikelfreisetzung (wenig Flusenbildung/Linting) und ein reduziertes Kontaminationsrisiko.


Cool shield core

Dieser firmeneigene Copolymer-Kern, der in unseren AeroChrome*-Mänteln zum Einsatz kommt, gibt Wasserdampf nach außen ab und sorgt so für kühlen Tragekomfort. Gleichzeitig verhindert er das Eindringen von Flüssigkeit in das Material - und hält selbst extremen Hochdrucktests stand (gemäß ASTM 1670).

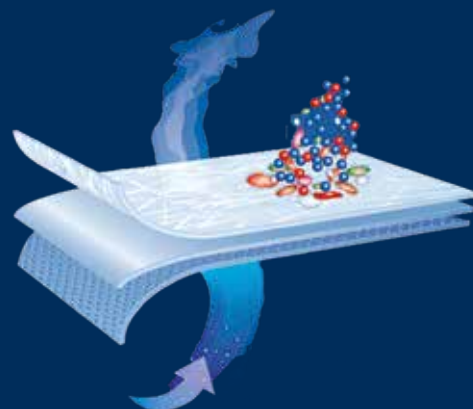

VALUESELECT*

Der ökonomische OP-Mantel

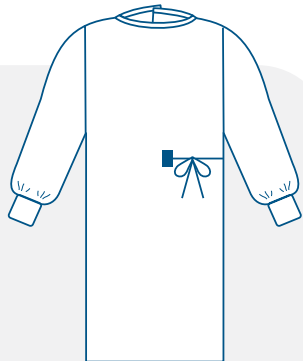

VALUESELECT*
Standard-OP-Mäntel

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
46665	46669	M	108 cm	26	513
46666	46670	L	117 cm	24	486
46667	46671	XL	126 cm	22	486
46668	46672	XXL	135 cm	22	486
47285	47281	L-XLong	150 cm	20	480
47286	47282	XL-XLong	150 cm	20	480
70433	70432	XXL-XLong	155 cm	20	420

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)


VALUESELECT* Standard-OP-Mäntel

Ein Schwerpunkt unserer leichten, standardleistungsfähigen OP-Mäntel ist der Tragekomfort.

- SMS
- Buchfaltung (horizontal gefaltet)
- Eingesetzte Ärmel
- Partikelarmes Material (wenig Flusen)
- Steriler OP-Mantel, inkl. 2 Handtüchern
- Bequem
- Leichtes Gewicht
- Weiche Bündchen
- Langer Klettverschluss für maximale Anpassungsfähigkeit des Kragens
- Alkoholabweisend

Einfach mehr für Ihr Geld.

Die VALUESELECT* OP-Mäntel von Halyard bieten optimalen Komfort zum günstigen Preis. Unsere in Standard- und hochleistungsfähiger Ausführung erhältlichen VALUESELECT* OP-Mäntel entsprechen den Anforderungen der EN 13795 und ergänzen das HALYARD* Sortiment in idealer Weise. Als qualitativ hochwertige, kostengünstige Option ist der VALUESELECT* OP-Mantel auf das Wesentliche reduziert.



VALUESELECT*
Hochleistungsfähige,
PE-verstärkte OP-Mäntel

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
46673	46677	M	108 cm	22	459
46674	46678	L	117 cm	22	432
46675	46679	XL	126 cm	22	432
46676	46680	XXL	135 cm	22	478
47287	47283	L-XLong	150 cm	20	420
47288	47284	XL-XLong	150 cm	20	360
70335	70434	XXL-XLong	155 cm	18	360

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)

VALUESELECT* High-Performance PE-Reinforced Surgical Gowns:

De voorzijde en de mouwen van onze hoogwaardige chirurgische jassen zijn verstevigd met polyethyleen (PE), wat zorgt voor betere vloeistofbescherming in de belaste zones.

- SMS
- Buchfaltung (horizontal gefaltet)
- Eingesetzte Ärmel
- Partikelarmes Material (wenig Flusen)
- Steriler OP-Mantel, inkl. 2 Handtüchern
- Bequem
- Leichtes Gewicht
- Weiche Bündchen
- Langer Klettverschluss für maximale Anpassungsfähigkeit des Kragens
- Alkoholabweisend


HALYARD BASICS*

OP-Mäntel



HALYARD BASICS*

Standard-OP-Mäntel

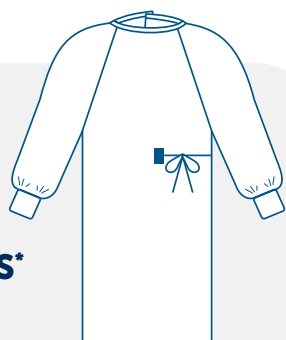


ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
13337	-	XL, XX-Long	175 cm	40	-
11783	33916	L - Handtuch im Einschlag (Handi-Bin)	125 cm	40	440
11784	33917	XL - Handtuch im Einschlag (Handi-Bin)	131 cm	40	400
99294	32109	L, X-Long Handtuch im Einschlag (Handi-Bin)	145 cm	40	460
99295	32113	XL, X-Long Handtuch im Einschlag (Handi-Bin)	150 cm	40	380
-	79284	L (Handi-Bin)	125 cm	-	640
-	79294	L, X-Long (Handi-Bin)	145 cm	-	560
-	79285	XL (Handi-Bin)	130 cm	-	560
-	79295	XL, X-Long (Handi-Bin)	150 cm	-	560

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)



HALYARD BASICS*

Hochleistungsfähige
OP-Mäntel mit Materialverstärkung

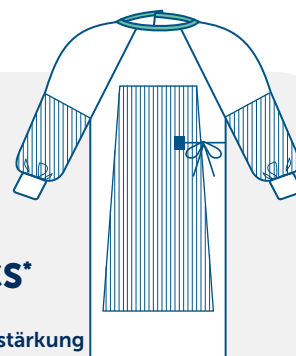

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
13815	-	XL, XXL	175 cm	32	-

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)

HALYARD BASICS*

OP-Mantel mit Materialverstärkung

- Farblich markiertes Kragenband: Grün
- SMS-Material
- Verstärkter Thorax- und Armbereich
- Überlappung der Rückenpartie
- Raglanärmel
- Geringe Partikelbildung (wenig Flusen)
- Steriler OP-Mantel, inkl. 2 Handtüchern

HALYARD BASICS*

OP-Mäntel

- Farblich markiertes Kragenband: Weiß
- SMS-Material
- Überlappung der Rückenpartie
- Raglanärmel
- Geringe Partikelbildung (wenig Flusen)
- Steriler OP-Mantel, inkl. 2 Handtüchern
- Erfüllt die Anforderungen der EN 13795-1:2019 an die Standard Performance

EVOLUTION* 4

Standard-OP-Mantel

Immer neue Maßstäbe setzen für Zuverlässigkeit und Qualität


Unsere weichen Einmal-OP-Mäntel EVOLUTION* 4 wurden aus dem atmungsaktiven SMS-Material von Halyard hergestellt. Diese Mäntel bieten ein optimales Gleichgewicht aus Komfort und Schutz bei Verfahren mit geringem bis mäßigem Flüssigkeitskontakt und entsprechen den Anforderungen gemäß EN 13795-1:2019 an die Standard Performance.

EVOLUTION* 4 - OP-Mäntel mit Materialverstärkung

- Ideal für kürzere und mittelgroße Verfahren
- EVOLUTION* 4 SMS-Material
- Partikelarm (wenig Flusen)
- Flammbeständig
- Verstellbarer Halsausschnitt: Klettverschluss
- Buchfaltung (horizontal gefaltet)
- Steriler OP-Mantel, inkl. 2 Handtüchern

EVOLUTION* 4 - Standard-OP-Mäntel

- Ideal für kürzere, minimalinvasive Verfahren
- Erhältlich in Ausführungen mit eingesetzten Ärmeln oder Raglanärmeln

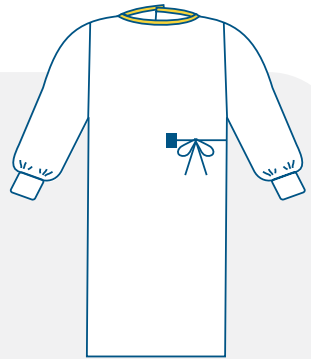


EVOLUTION* 4
Standard-OP-Mäntel mit
eingesetzten Ärmeln

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
90016	72978	L	117 cm	36	640
90046	72988	XL	127 cm	32	640
90019	70391	L, X-Long	132 cm	34	66
90049	70392	XL, X-Long	137 cm	34	60
-	79419	L – Handtuch im Umschlag	111 cm	-	512
-	79434	XL – Handtuch im Umschlag	121 cm	-	448

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)



EVOLUTION* 4
Verstärkte OP-Mäntel mit
Raglanärmeln

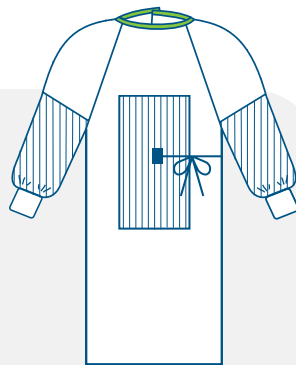


ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
90112	78911	L	123 cm	32	36
90113	78913	L, X-Long	143 cm	30	54
90142	78921	XL	127 cm	30	36
90143	78923	XL, X-Long	148 cm	32	48

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)



EVOLUTION* 4
Standard-OP-Mäntel
mit Raglanärmeln

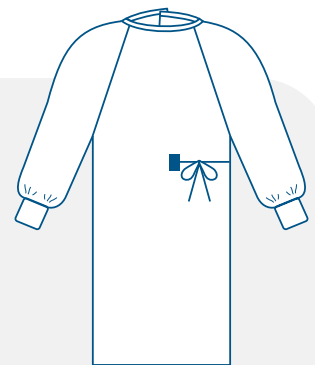

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
90002	-	S	115 cm	36	-
90012	79970	L	123 cm	36	40
90042	79980	XL	127 cm	34	36
90013	79973	L, X-Long	143 cm	34	60
90043	79983	XL, X-Long	148 cm	34	48

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)

ULTRA

Optimierter OP-Mantel Standard Performance


Mehr Komfort.

Die Halyard ULTRA OP-Mäntel bieten ein ideales Gleichgewicht aus Tragekomfort und Schutz für Verfahren mittlerer Länge.

- Raglanärmel
- Partikelarmes Material (wenig Flusen)
- Flammbeständig
- Verstellbarer Kragen: Klettverschluss
- Buchfaltung (horizontal gefaltet)
- Steriler OP-Mantel, inkl. ein Handtuch
- Entspricht den Anforderungen der EN13795-1:2019 an die Standard Performance



ULTRA
Standard-OP-Mäntel

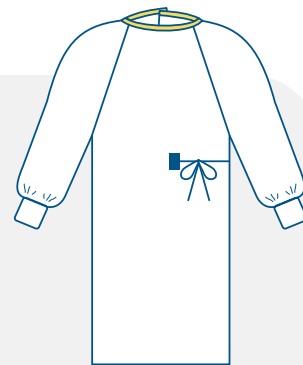

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
-	47247	S	115 cm	-	640
95113	-	L	123 cm	32	-
95123	-	XL	128 cm	30	-
95131	71331	XXL	135 cm	28	36
95114	71626	L, X-Long	138 cm	32	60
95124	71627	XL, X-Long	144 cm	30	48

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)

ULTRA


Verstevigde chirurgische jassen met halsbescherming en duimlussen

OP-Mäntel für besondere Bereiche

- Firmeneigenes SMS-Material der 4. Generation
- Extrabreite Materialverstärkungen
- Raglanärmel
- Partikelarmes Material (wenig Flusen)
- Flammbeständig
- Verstellbarer Halsausschnitt: Klettverschluss
- Halsschutz
- Buchfaltung (horizontal gefaltet)
- Steriler OP-Mantel, inkl. ein Handtuch



ULTRA
Materialverstärkte OP-Mäntel

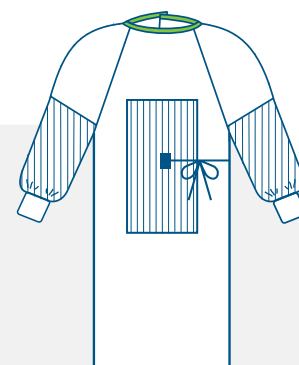

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
90363	77337	L, XL	143 cm	30	48
90373	77336	XL, X-Long	148 cm	28	36


+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)

AERO CHROME*

Hochleistungsfähiger OP-Mantel

Zu warme, zu schwere OP-Mäntel gehören der Vergangenheit an!

- **Roter Kragen:** kennzeichnet hochleistungsfähige OP-Mäntel
- **Atmungsaktives Rückenteil:** für maximale Luftzirkulation und kühlen Tragekomfort
- **Weiches, leichtes, atmungsaktives Material:** schützt Ihr Personal und bleibt dennoch angenehm kühl
- **Geringe Partikelbildung (wenig Flusen):** verringert das Risiko von Wundkontamination und Infektion
- **Entspricht den Anforderungen der EN13795-1:2019 an High Performance:** gewährleistet überlegenen Schutz
- **Entspricht der AAMI-Norm, Schutzniveau 4:** bietet höchsten Schutz vor Flüssigkeit und Mikroben in kritischen Bereichen
- **Steriler OP-Mantel, inkl. 2 Handtüchern:** zusätzlicher Komfort für Ihr Team
- **Raglanärmel**



AERO CHROME*
OP-Mäntel

ART.-NR. STERIL	ART.-NR. UNSTERIL	GRÖSSE	LÄNGE*	STÜCK/ KARTON STERIL	STÜCK/ KARTON UNSTERIL
48395	48392NS	L	125 cm	30	40
48397	48399NS	L, X-Long	145 cm	30	36
48396	48393NS	XL	131 cm	28	32
48398	48400NS	XL, X-Long	151 cm	30	32
48402	48401NS	XXL, X-Long	137 cm	28	30
48403	48394NS	XXL	137 cm	28	32

+ Länge Rückenteil (Halsausschnitt bis unterer Rand)



Unsere
Zusage
an Sie

Überlegene
Infektions-
prävention

Weitere Informationen erhalten Sie über unseren O&M Halyard Kundendienst:

DE (gebührenfrei)

📞 0800 071 35 52

📠 0800 100 68 14

✉ kundendienst@owens-minor.com