



Le moteur de la réussite, c'est votre équipe.

La casaque chirurgicale HALYARD*, votre atout indispensable.

Notre
engagement
envers vous

Mieux
prévenir les
infections



Une casaque chirurgicale pour chaque tâche

Dans la salle d'opération, vous risquez à tout moment des éclaboussures de sang et des fluides corporels. Un équipement de protection correspondant aux besoins de la tâche peut faire toute la différence. Halyard vous propose une gamme complète de casaques chirurgicales : chacune offre différents niveaux de protection et est adaptée à différents types d'interventions chirurgicales. Avec Halyard, quelle que soit l'intervention chirurgicale, nos casaques vous protègent.

Protection maximale – rien de plus facile

Halyard a bien compris que chaque acte chirurgical nécessite un niveau de protection différent. C'est pourquoi nous avons mis au point un système de codes couleurs vous permettant d'identifier facilement et rapidement la casaque correspondant à votre besoin particulier.

Nos casaques se déclinent en trois niveaux de protection, chacun étant identifié par un cordon d'encolure de couleur :

Jaune

Standard
Performance

Vert

performance standard
avec renforcement
de tissu

Rouge

casques haute
performance avec
film de renforcement




Trouver la **casaque chirurgicale** qu'il vous faut ? Rien de plus facile

Niveau de protection

- Haute performance
- Performance standard avec renforcement de tissu
- Performance standard


Caractéristiques des tissus

-  Respirabilité
-  Protection contre les fluides
-  Comfort

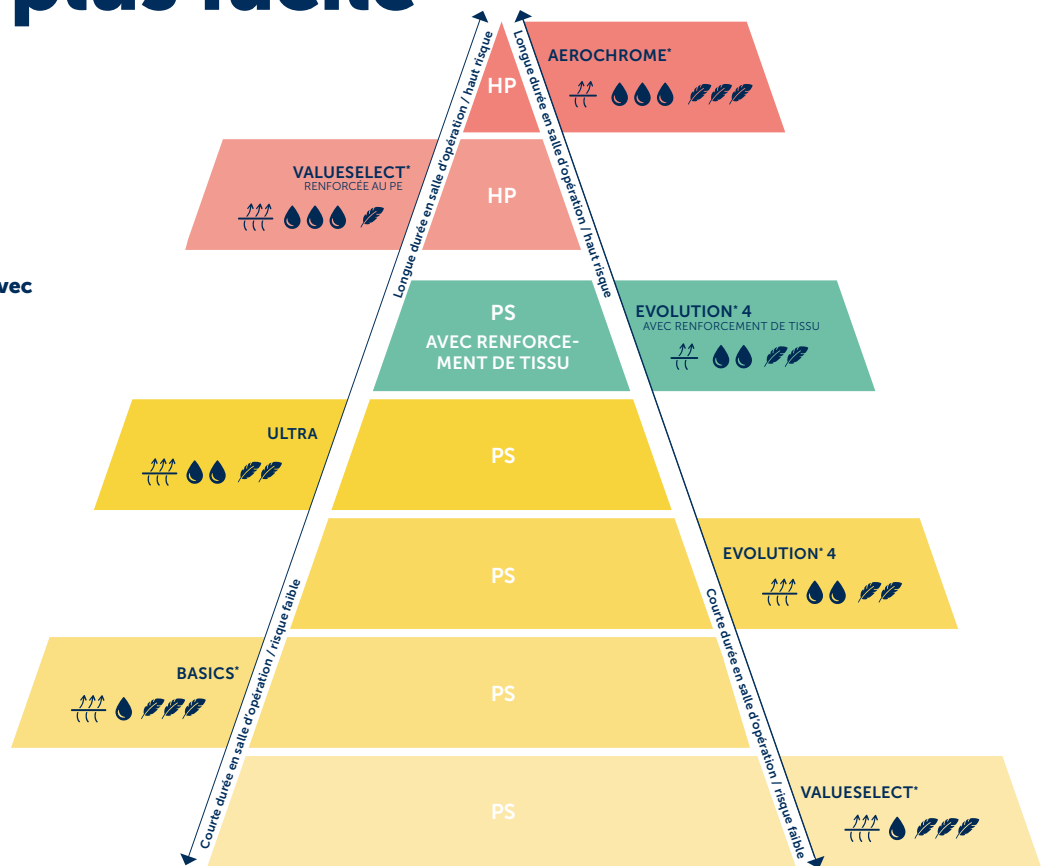

● ● ● *Termes « Performance standard » et « Haute performance » définis dans la norme européenne EN13795-1:2019

LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE HALYARD*

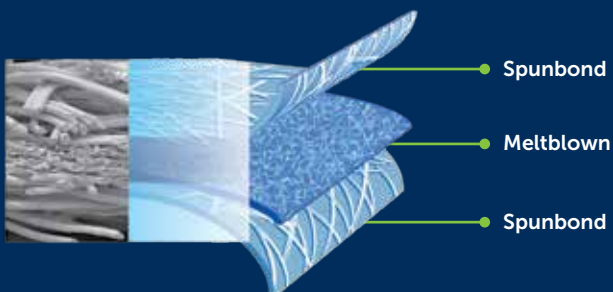


SMS

Avec deux couches extérieures spunbond en polypropylène assurant haute résistance et durabilité et une couche intermédiaire meltblown de protection antibactérienne et contre les fluides, notre technologie SMS réduit l'apparition de peluches et le risque de contamination.


Cool shield core

Ce noyau en copolymère exclusif utilisé pour nos casaque AeroChrome* évacue la vapeur de surface et crée une agréable fraîcheur tout en empêchant la pénétration de fluides dans le tissu, même dans les tests sous pression extrême (méthode de test ASTM 1670).

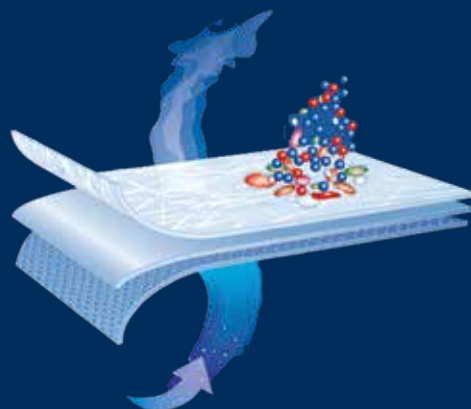

VALUESELECT*

Casaques chirurgicales économiques

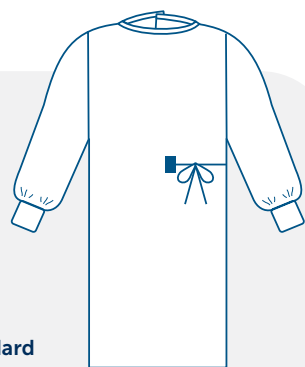

VALUESELECT*

Casaque chirurgicale standard

CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
46665	46669	M	108 cm	26	513
46666	46670	L	117 cm	24	486
46667	46671	XL	126 cm	22	486
46668	46672	XXL	135 cm	22	486
47285	47281	L-XLong	150 cm	20	480
47286	47282	XL-XLong	150 cm	20	480
70433	70432	XXL-XLong	155 cm	20	420

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)

Casaques chirurgicales standard VALUESELECT* :

Nos casaques chirurgicales à performance standard sont légères et mettent l'accent sur le confort.

- SMS
- Pliage aseptique
- Manches montées
- Tissu à faible peluchage
- Casaque stérile fournie avec deux serviettes
- Confortables
- Légères
- Poignets doux
- Col en Velcro long ajustable pour une flexibilité optimale
- Traitement anti-alcool

Plus de valeur, moins de dépenses.

Les casaques chirurgicales VALUESELECT* de Halyard offrent un confort optimal à petit prix. Disponibles dans des versions à performance standard et à haute performance, nos casaques chirurgicales VALUESELECT* sont conformes à la norme EN13795 et complètent idéalement la gamme HALYARD*. VALUESELECT* est une casaque économique et de qualité qui vous permet de réduire significativement vos frais.



VALUESELECT*

Casaque chirurgicale haute performance renforcée au PE

CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
46673	46677	M	108 cm	22	459
46674	46678	L	117 cm	22	432
46675	46679	XL	126 cm	22	432
46676	46680	XXL	135 cm	22	478
47287	47283	L-XLong	150 cm	20	420
47288	47284	XL-XLong	150 cm	20	360
70335	70434	XXL-XLong	155 cm	18	360

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)


Casaques chirurgicales haute performance VALUESELECT* renforcées au PE :

Le plastron et les bras de nos casaques chirurgicales haute performance sont renforcés au polyéthylène (PE), garantissant ainsi que les zones critiques résistent aux liquides.

- SMS
- Pliage aseptique
- Manches montées
- Tissu à faible peluchage
- Casaque stérile fournie avec deux serviettes
- Confortables
- Légères
- Poignets doux
- Col en Velcro long ajustable pour une flexibilité optimale
- Traitement anti-alcool

HALYARD BASICS*

Casaques chirurgicales

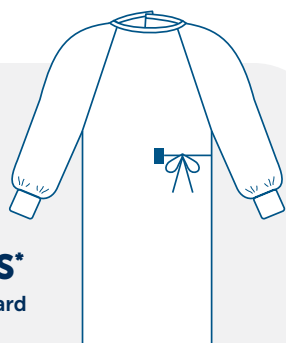

HALYARD BASICS*
Casaque chirurgicale standard


CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
13337	-	X-Large, XX-Long	175 cm	40	-
11783	33916	Large - serviette en suremballage (HANDI-BIN)	125 cm	40	440
11784	33917	X-Large - serviette en suremballage (HANDI-BIN)	131 cm	40	400
99294	32109	Large, X-Long - serviette en suremballage (HANDI-BIN)	145 cm	40	460
99295	32113	X-Large, X-Long - serviette en suremballage (HANDI-BIN)	150 cm	40	380
-	79284	Large (HANDI-BIN)	125 cm	-	640
-	79294	Large, X-Long (HANDI-BIN)	145 cm	-	560
-	79285	X-Large (HANDI-BIN)	130 cm	-	560
-	79295	X-Large, X-Long (HANDI-BIN)	150 cm	-	560

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)

HALYARD BASICS*

Casaques chirurgicales :

- Code couleur du cordon d'encolure : blanc
- Matériau SMS
- Chevauchement au dos
- Manches raglan
- Tissu à faible peluchage
- Casaque stérile emballée avec 2 serviettes
- Performance standard conforme à la norme EN13795-1:2019

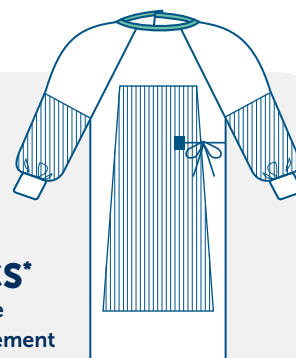

HALYARD BASICS*
Casaque chirurgicale haute performance avec renforcement de tissu

CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
13815	-	X-Large, XX-Long	175 cm	32	-

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)

HALYARD BASICS*

Casaques chirurgicales avec renforcement de tissu :

- Code couleur du cordon d'encolure : vert
- Matériau SMS
- Tissu renforcé à la poitrine et aux manches
- Chevauchement au dos
- Manches raglan
- Tissu à faible peluchage
- Casaque stérile emballée avec 2 serviettes

EVOLUTION* 4

Casaques chirurgicales standard

Fiabilité et qualité : nous mettons la barre plus haut

Nos casaques chirurgicales à usage unique EVOLUTION* 4 sont en tissu Halyard SMS très doux et respirant. Ces casaques offrent un équilibre parfait entre confort et protection durant les interventions et assurent un contact faible à modéré avec les fluides ; elles sont conformes aux dispositions de performance standard de la norme EN13795-1:2019.

Casaques chirurgicales EVOLUTION* 4 avec renforcement de tissu :

- Idéales pour les interventions courtes et moyennement invasives
- EVOLUTION* 4 tissu SMS
- Faible formation de peluches
- Résistantes aux flammes
- Encolure réglable : fermeture Velcro
- Pliage aseptique
- Casaque stérile emballée avec 2 serviettes


Casaques chirurgicales standard EVOLUTION* 4 :

- Idéales pour les interventions courtes et peu invasives
- Deux versions : à manches montées ou à manches raglan



CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
90112	78911	Large	123 cm	32	36
90113	78913	Large, X-Long	143 cm	30	54
90142	78921	X-Large	127 cm	30	36
90143	78923	X-Large, X-Long	148 cm	32	48

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)

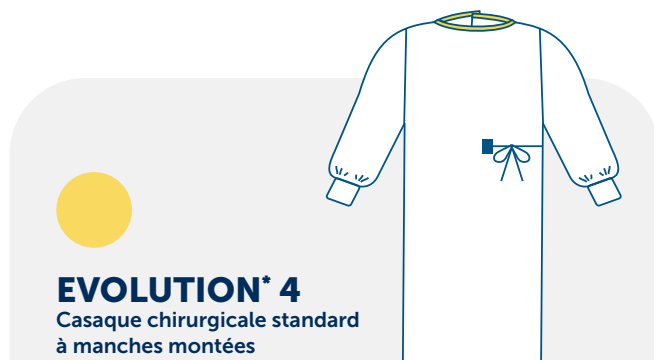

CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
90016	72978	Large	117 cm	36	640
90046	72988	X-Large	127 cm	32	640
90019	70391	Large, X-Long	132 cm	34	66
90049	70392	X-Large, X-Long	137 cm	34	60
-	79419	Large – serviette en suremballage	111 cm	-	512
-	79434	X-Large – serviette en suremballage	121 cm	-	448

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)



CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
90002	-	Small	115 cm	36	-
90012	79970	Large	123 cm	36	40
90042	79980	X-Large	127 cm	34	36
90013	79973	Large, X-Long	143 cm	34	60
90043	79983	X-Large, X-Long	148 cm	34	48

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)

ULTRA

Casaque améliorée à performance standard


Plus de confort.

Les casaques chirurgicales Halyard ULTRA sont conçues pour offrir un équilibre parfait entre le confort et la protection lors des interventions chirurgicales moyennement invasives.

- Manches raglan
- Tissu à faible peluchage
- Résistantes aux flammes
- Encolure réglable : fermeture Velcro
- Pliage aseptique
- Casaque stérile emballée avec 1 serviette
- Conformes aux dispositions de performance standard de la norme EN13795-1:2019



ULTRA
Standard-OP-Mäntel

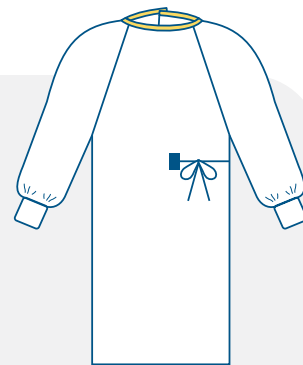

CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
-	47247	Small	115 cm	-	640
95113	-	Large	123 cm	32	-
95123	-	X-Large	128 cm	30	-
95131	71331	XX-Large	135 cm	28	36
95114	71626	Large, X-Long	138 cm	32	60
95124	71627	X-Large, X-Long	144 cm	30	48

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)

ULTRA


Casaques chirurgicales avec renforcement de tissu, protection du cou et passe-pouces

Casaques chirurgicales spécialisées

- Tissu SMS exclusif 4e génération
- Renforcements de tissu extralarges
- Manches raglan
- Tissu à faible peluchage
- Résistantes aux flammes
- Encolure réglable : fermeture Velcro
- Protection du cou
- Pliage aseptique
- Casaque stérile emballée avec 1 serviette



ULTRA
Casaque chirurgicale avec renforcement de tissu

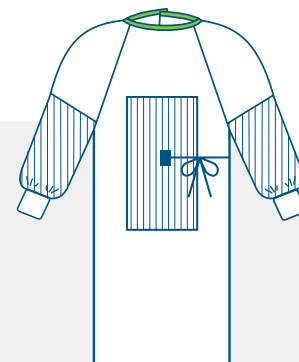

CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
90363	77337	Large, X-Long	143 cm	30	48
90373	77336	X-Large, X-Long	148 cm	28	36

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)

AERO CHROME*

Casaques chirurgicales haute performance

Dites adieu aux casaques chaudes et lourdes !

- **Col rouge** : pour identifier facilement une casaque haute performance.
- **Partie arrière respirante** : circulation de l'air optimale pour associer confort et fraîcheur.
- **Tissu doux, léger et respirant** : protège les soignants tout en garantissant confort et fraîcheur.
- **Faible formation de peluches** : réduit le risque de contamination et d'infection des plaies.
- **Conformes au niveau Haute performance de la norme EN13795-1:2019** : garantie d'une protection supérieure.
- **Conformes à la norme AAMI niveau 4** : assurant le niveau le plus élevé de protection contre les fluides et microbes dans les zones critiques.
- **Casaque stérile emballée avec 2 serviettes** : commodité accrue pour votre équipe.
- **Manches raglan**



AERO CHROME*
Casaque chirurgicale



CODE STÉRILE	CODE NON STÉRILE	TAILLE	LONGUEUR*	PIÈCES / BOÎTE, STÉRILE	PIÈCES / BOÎTE, NON STÉRILE
48395	48392NS	Large	125 cm	30	40
48397	48399NS	Large, X-Long	145 cm	30	36
48396	48393NS	X-Large	131 cm	28	32
48398	48400NS	X-Large, X-Long	151 cm	30	32
48402	48401NS	XX-Large, X-Long	137 cm	28	30
48403	48394NS	XX-Large	137 cm	28	32

+ longueur du dos (du cou jusqu'en bas)



Notre engagement envers vous

Mieux prévenir les infections

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre service clientèle O&M Halyard :

FR (gratuit)

☎ 0805 54 27 51
🖨 0805 37 36 12
✉ serviceclients@owens-minor.com

BE (gratuit)

☎ 0800 890 13
🖨 0800 117 33
✉ serviceclients@owens-minor.com

LUX (gratuit)

☎ 0800 852 66
🖨 0800 266 56
✉ serviceclients@owens-minor.com