



Dagelijks succes voor uw team

HALYARD* chirurgische jassen voorzien in al uw behoeften.

Onze
belofte
aan u

Betere
infectie-
preventie



Een chirurgische jas voor elke handeling

In de OK loopt u altijd het risico in aanraking te komen met bloed en lichaamsvloeistoffen. De juiste mate van bescherming bij elke handeling kan een groot verschil maken. Halyard biedt een compleet assortiment chirurgische jassen, met diverse beschermingsniveaus en uitgerust voor verschillende soorten chirurgische ingrepen. Met de jassen van Halyard zit u altijd goed – om welke chirurgische handeling het ook gaat.

Maximale bescherming – u hoeft alleen maar tot 3 te kunnen tellen

Halyard is zich ervan bewust dat verschillende chirurgische taken om verschillende beschermingsniveaus vragen en maakt daarom gebruik van een systeem met kleurcodes. Zo kunt u eenvoudig en snel de juiste chirurgische jas vinden die aansluit bij wat u op dat moment nodig hebt.

Onze jassen bieden drie beschermingsniveaus, elk gemarkeerd door een gekleurde band op de kraag:

Geel

Standaard prestaties

Groen

Standaard prestaties, met verstevigde zones

Rood

Hoogwaardige prestaties, met folie verstevigd




De juiste chirurgische jas vinden – u hoeft alleen maar tot 3 te kunnen tellen

Beschermingsniveau

- Hoogwaardige prestaties
- Standaard prestaties, met verstevigde zones
- Standaard prestaties


Fabric features

- Ademend vermogen
- Vloeistofbescherming
- Comfort

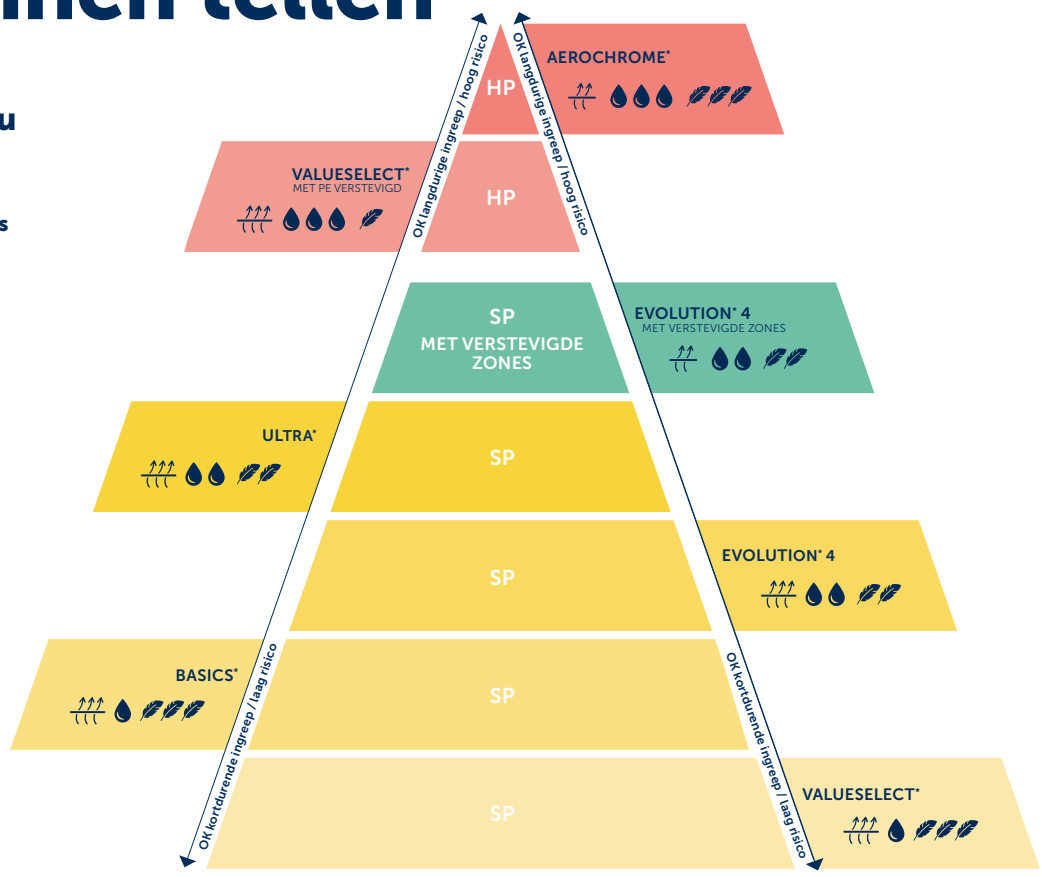

● ● ● "Standaard prestaties" en "hoogwaardige prestaties" zoals gedefinieerd in de Europese norm EN13795-1:2019

KERNCOMPETENTIES VAN HALYARD*

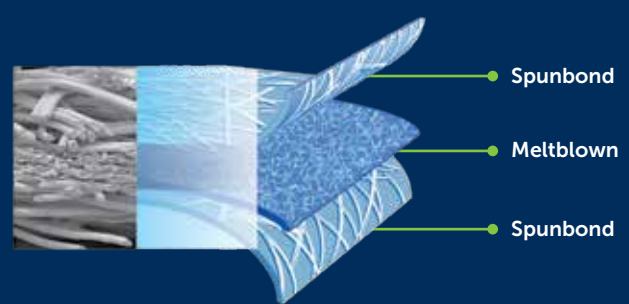


SMS

Onze SMS-technologie omvat twee spunbond-buitenlagen van polypropyleen die superieure sterkte en duurzaamheid bieden, en een middelste meltblown-laag die beschermt tegen bacteriën en vloeistoffen. Deze technologie staat garant voor een laag pluisgehalte en een verminderd risico op besmetting.


Cool shield core

De gepatenteerde copolymeer kern van onze Aero Chrome* jassen zorgt ervoor dat vochtdamp kan ontsnappen en biedt daarmee aangename verkoeling, maar voorkomt het doorleken van vloeistof door de stof heen – zelfs bij tests onder extreem hoge druk (volgens testmethode ASTM 1670).

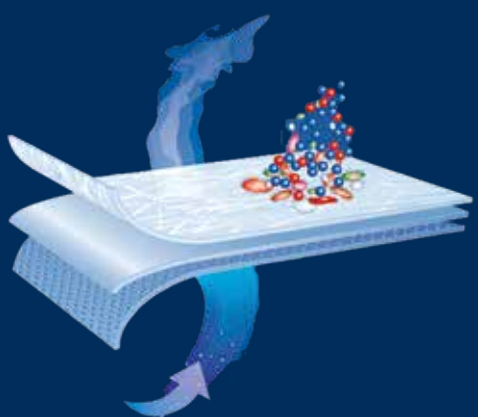

VALUESELECT*

Kostenbesparende chirurgische jassen

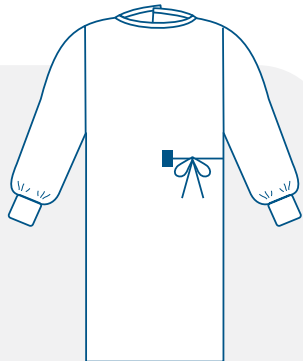

VALUESELECT*
Standaard chirurgische jas

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELN PER DOOS, NIET STERIEL
46665	46669	Medium	108 cm	26	513
46666	46670	Large	117 cm	24	486
46667	46671	X-Large	126 cm	22	486
46668	46672	XX-Large	135 cm	22	486
47285	47281	L-X Long	150 cm	20	480
47286	47282	XL-XLong	150 cm	20	480
70433	70432	XXL-XLong	155 cm	20	420

+ lengte achterpand (hals tot onderkant)


VALUESELECT* standaard chirurgische jassen:

Onze lichtgewicht chirurgische jassen met standaard prestaties zijn zeer comfortabel.

- SMS
- 'Book-fold'-vouwmethode
- Ingezette mouwen
- Materiaal met laag pluisgehalte
- Steriele jas verpakt met twee handdoeken
- Comfortabel
- Lichtgewicht
- Zachte manchetten
- Kraag biedt maximale flexibiliteit: verstelbaar met behulp van klittenband
- Alcoholafstotend

Meer waar voor uw geld.

VALUESELECT* chirurgische jassen van Halyard bieden optimaal comfort tegen een voordelige prijs. De VALUESELECT* chirurgische jassen – beschikbaar in de uitvoeringen standaard en hoogwaardig – voldoen aan EN13795 en vormen daarmee de perfecte aanvulling op het HALYARD* assortiment. VALUESELECT* jassen zijn voordelige kwaliteitsjassen, die bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van kosten.



VALUESELECT*
Hoogwaardige PE-verstevigde chirurgische jas

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELN PER DOOS, NIET STERIEL
46673	46677	Medium	108 cm	22	459
46674	46678	Large	117 cm	22	432
46675	46679	X-Large	126 cm	22	432
46676	46680	XX-Large	135 cm	22	478
47287	47283	L-XLong	150 cm	20	420
47288	47284	XL-XLong	150 cm	20	360
70335	70434	XXL-XLong	155 cm	18	360

+ lengte achterpand (hals tot onderkant)

VALUESELECT* High-Performance PE-Reinforced Surgical Gowns:

De voorzijde en de mouwen van onze hoogwaardige chirurgische jassen zijn versterkt met polyethyleen (PE), wat zorgt voor betere vloeistofbescherming in de belaste zones.

- SMS
- 'Book-fold'-vouwmethode
- Ingezette mouwen
- Materiaal met laag pluisgehalte
- Steriele jas verpakt met twee handdoeken
- Comfortabel
- Lichtgewicht
- Zachte manchetten
- Kraag biedt maximale flexibiliteit: verstelbaar met behulp van klittenband
- Alcoholafstotend


HALYARD BASICS*

Chirurgische jassen



HALYARD BASICS*

Standaard chirurgische jas

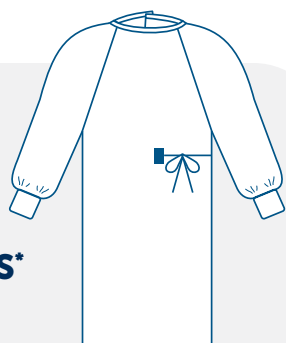

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELEN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELEN PER DOOS, NIET STERIEL
13337	-	X-Large, XX-Long	175 cm	40	-
11783	33916	Large - handdoek apart verpakt (HANDI-BIN)	125 cm	40	440
11784	33917	X-Large - handdoek apart verpakt (HANDI-BIN)	131 cm	40	400
99294	32109	Large, X-Long - handdoek apart verpakt (HANDI-BIN)	145 cm	40	460
99295	32113	X-Large, X-Long - handdoek apart verpakt (HANDI-BIN)	150 cm	40	380
-	79284	Large (HANDI-BIN)	125 cm	-	640
-	79294	Large, X-Long (handi-bin)	145 cm	-	560
-	79285	X-Large (HANDI-BIN)	130 cm	-	560
-	79295	X-Large, X-Long (HANDI-BIN)	150 cm	-	560

+ lengte achterpand (hals tot onderkant)



HALYARD BASICS*

Hoogwaardige chirurgische jas met verstevigde zones



STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELEN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELEN PER DOOS, NIET STERIEL
13815	-	X-Large, XX-Long	175 cm	32	-

+ lengte achterpand (hals tot onderkant)

HALYARD BASICS*

Chirurgische jassen met verstevigde zones:

- Geleerde band op kraag: groen
- SMS-materiaal
- Verstevigde zones op borst en mouwen
- Overlappend achterpand
- Raglanmouwen
- Materiaal met laag pluisgehalte
- Steriele jas verpakt met 2 handdoeken

HALYARD BASICS*

Chirurgische jassen:

- Geleerde band op kraag: wit
- SMS-materiaal
- Overlappend achterpand
- Raglanmouwen
- Materiaal met laag pluisgehalte
- Steriele jas verpakt met 2 handdoeken
- Voldoet aan de standaard prestaties volgens EN13795-1:2019

EVOLUTION* 4

Standaard chirurgische jassen

Nieuwe standaard voor betrouwbaarheid en kwaliteit

Onze zachte EVOLUTION* 4 chirurgische jassen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van het ademende SMS-materiaal van Halyard. De jassen bieden de juiste balans tussen comfort enerzijds en bescherming tijdens ingrepen met weinig tot gemiddeld contact met vloeistoffen anderzijds, en voldoen aan de standaard prestaties volgens de EN13795-1:2019-vereisten.

EVOLUTION* 4 chirurgische jassen met verstevigde zones:

- Perfect voor kortere en middellange ingrepen
- EVOLUTION* 4 SMS-materiaal
- Laag pluisgehalte
- Vlambestendig
- Verstelbare halslijn met klittenband
- 'Book fold'-vouwmethode
- Steriele jas verpakt met 2 handdoeken

EVOLUTION* 4 standaard chirurgische jassen:


- Perfect voor kortere, minimaal-invasieve ingrepen
- Beschikbaar in uitvoering met ingezette mouwen of met raglanmouwen



EVOLUTION* 4
Standaard chirurgische jas met ingezette mouwen

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELEN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELEN PER DOOS, NIET STERIEL
90016	72978	Large	117 cm	36	640
90046	72988	X-Large	127 cm	32	640
90019	70391	Large, X-Long	132 cm	34	66
90049	70392	X-Large, X-Long	137 cm	34	60
-	79419	Large, handdoek apart verpakt	111 cm	-	512
-	79434	X-Large – Towel in Overwrap	121 cm	-	448


+lengte achterpand (hals tot onderkant)

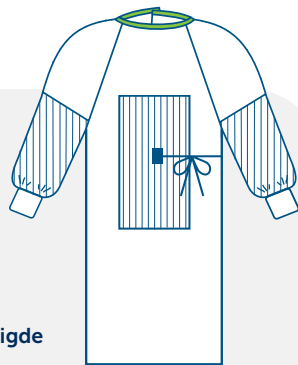

EVOLUTION* 4
Chirurgische jas met verstevigde zones, met raglanmouwen

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELEN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELEN PER DOOS, NIET STERIEL
90112	78911	Large	123 cm	32	36
90113	78913	Large, X-Long	143 cm	30	54
90142	78921	X-Large	127 cm	30	36
90143	78923	X-Large, X-Long	148 cm	32	48

+lengte achterpand (hals tot onderkant)

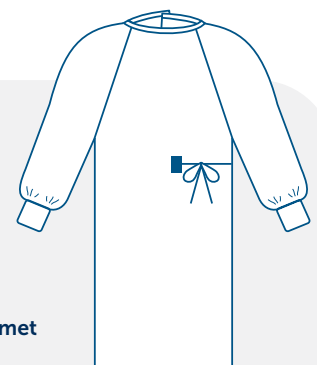

EVOLUTION* 4
Standaard chirurgische jas met raglanmouwen

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELEN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELEN PER DOOS, NIET STERIEL
90002	-	Small	115 cm	36	-
90012	79970	Large	123 cm	36	40
90042	79980	X-Large	127 cm	34	36
90013	79973	Large, X-Long	143 cm	34	60
90043	79983	X-Large, X-Long	148 cm	34	48

+lengte achterpand (hals tot onderkant)

ULTRA

Verstevigde standaard jassen


Meer comfort.

ULTRA chirurgische jassen van Halyard zijn ontworpen met het oog op de juiste balans tussen comfort en bescherming bij middellange ingrepen.

- Raglanmouwen
- Materiaal met laag pluusgehalte
- Vlambestendig
- Verstelbare halslijn met klittenband
- 'Book fold'-vouwmethode
- Steriele jas verpakt met 1 handdoek
- Voldoen aan de standaard prestaties volgens de EN13795-1:2019-vereisten



ULTRA Standaard chirurgische jas

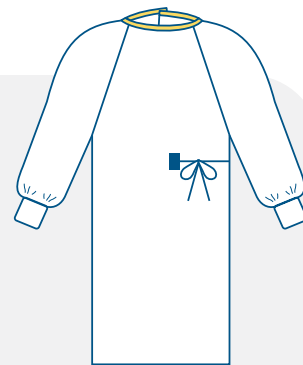

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELEN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELEN PER DOOS, NIET STERIEL
-	47247	Small	115 cm	-	640
95113	-	Large	123 cm	32	-
95123	-	X-Large	128 cm	30	-
95131	71331	XX-Large	135 cm	28	36
95114	71626	Large, X-Long	138 cm	32	60
95124	71627	X-Large, X-Long	144 cm	30	48

+ lengte achterpand (hals tot onderkant)

ULTRA


Verstevigde chirurgische jassen met halsbescherming en duimlussen

Speciality Surgical Gowns

- Gepatenteerde 4^e generatie SMS-materiaal
- Extra ruime verstevigde zones
- Raglanmouwen
- Materiaal met laag pluusgehalte
- Vlambestendig
- Verstelbare halslijn met klittenband
- Halsbescherming
- 'Book fold'-vouwmethode
- Steriele jas verpakt met 1 handdoek



ULTRA Speciale chirurgische jassen

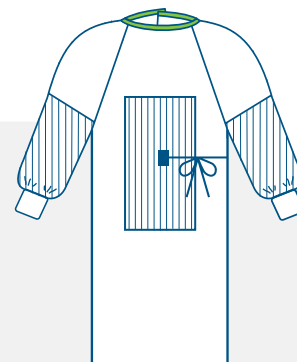

STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELEN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELEN PER DOOS, NIET STERIEL
90363	77337	Large, X-Long	143 cm	30	48
90373	77336	X-Large, X-Long	148 cm	28	36

+ lengte achterpand (hals tot onderkant)

AERO CHROME*

Hoogwaardige chirurgische jas

Zeg maar dag tegen warme en zware chirurgische jassen!

- **Rode kraag:** maakt de hoogwaardige chirurgische jas eenvoudig herkenbaar.
- **Achterpand met ademend vermogen:** maximaliseert luchtstroom voor koel comfort.
- **Zacht, licht en ademend materiaal:** biedt medewerkers blijvende bescherming, maar voelt tegelijkertijd koel en comfortabel aan.
- **Pluisarm:** zorgt voor minder risico op wondbesmetting en -infectie.
- **Voldoet aan de hoogwaardige prestaties volgens EN13795-1:2019:** zorgt voor superieure bescherming.
- **Voldoet aan de vereisten van AAMI-niveau 4:** biedt het hoogste beschermingsniveau tegen vloeistoffen en microben in belaste zones.
- **Steriele jas verpakt met 2 handdoeken:** extra gemak voor uw team.
- **Raglanmouwen**



AERO CHROME*

Chirurgische jas



STERIELE CODE	NIET-STERIELE CODE	MAAT	LENGTE*	ARTIKELN PER DOOS, STERIEL	ARTIKELN PER DOOS, NIET STERIEL
48395	48392NS	Large	125 cm	30	40
48397	48399NS	Large, X-Long	145 cm	30	36
48396	48393NS	X-Large	131 cm	28	32
48398	48400NS	X-Large, X-Long	151 cm	30	32
48402	48401NS	XX-Large, X-Long	137 cm	28	30
48403	48394NS	XX-Large	137 cm	28	32

+ lengte achterpand (hals tot onderkant)



Onze belofte aan u

Betere infectiepreventie

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Care Team van O&M Halyard:

NL (gratis)

- 📞 0800 020 17 33
- 📞 0800 022 75 49
- ✉️ customerservice.bnl@owens-minor.com

BE (gratis)

- 📞 0800 890 13
- 📞 0800 117 33
- ✉️ customerservice.bnl@owens-minor.com